

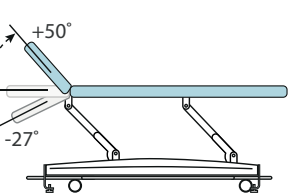
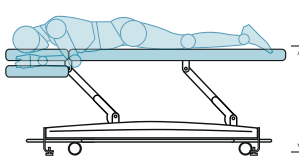
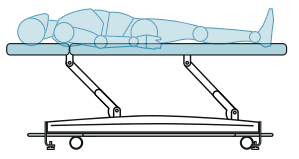
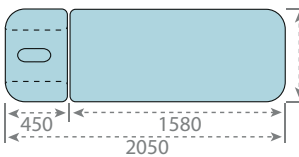
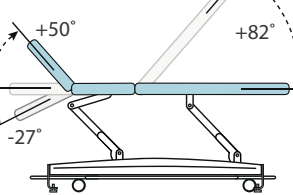
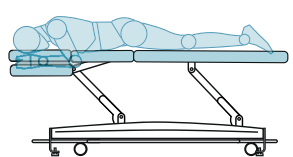


Données techniques





Modèle : MTS2-H/E-65/75

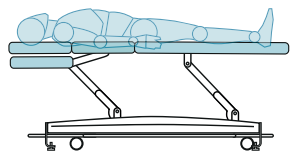





Modèle : MTS3-H/E-65/75

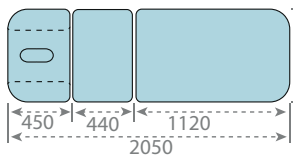





Modèle : TTS2-H/E-65/75

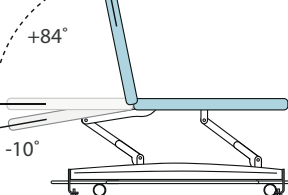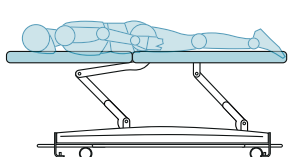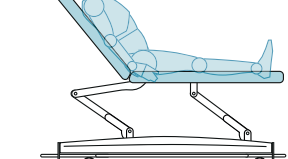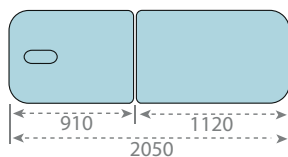





Modèle : TTS3-H/E-65/75

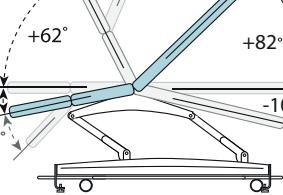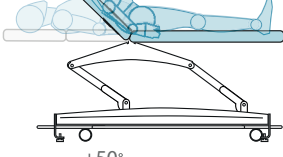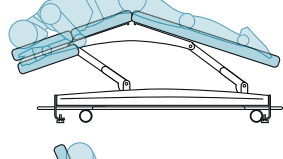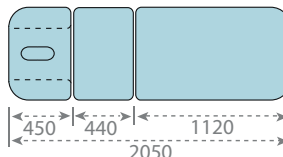




Modèle : TTS4-65/75

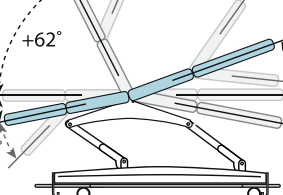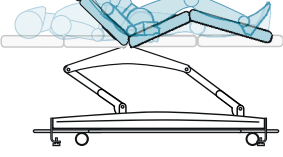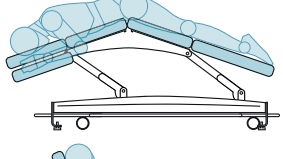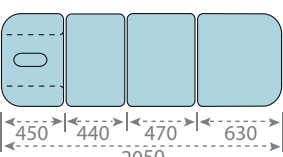





Modèle : TTS8-65/75

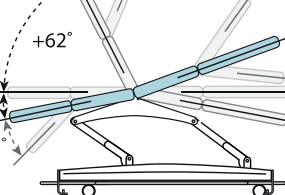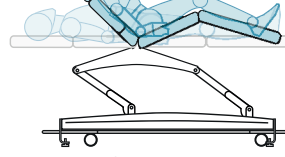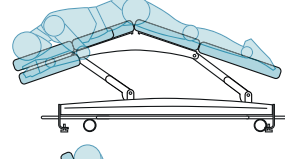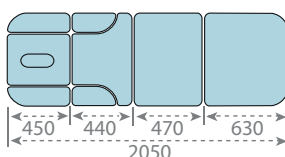

Modèle : BTS-100/120

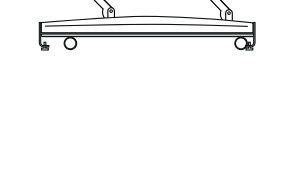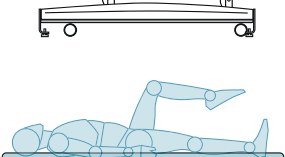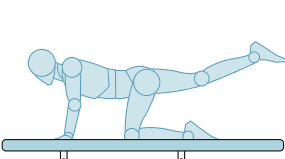

Modèle : BTS2-100/120

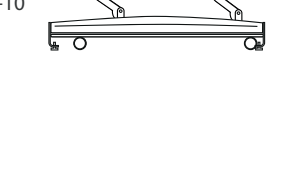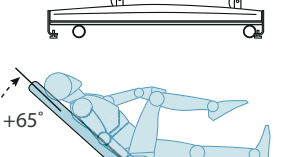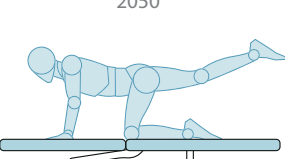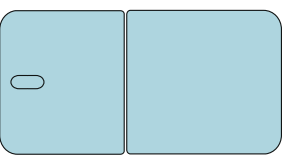

Equipements et accessoires

standard ● optionnel ○

	MTS2-E	MTS2-H	MTS3-E	MTS3-H	TTS2-E	TTS2-H	TTS3-E	TTS3-H	TTS4	TTS8	BTS	BTS2
rembourrage en mousse souple et durable (8 cm) – SER-SFU8-S	●		●		●		●		●	●	●	●
rembourrage en mousse ferme et durable (8 cm) – FFU8-S	○		○		○		○		○	○	○	○
cavité faciale avec coutures soudées et scellées (bouchon inclus)	●		●		●		●		●	●	●	●
appui-tête tripartite réglable simultanément – TVL-S	○		○		/		○		○	●	/	/
porte-rouleau de papier sous l'appui-tête – NZP1-S (non disponible avec la TVL-S)	○		○		○		○		○	/	/	/
porte-rouleau de papier fixé à la base de la table – NZP2-S	○		○		○		○		○	○	/	/
couverture PVC pour la partie des jambes – PVC8-S	○		○		○		○		○	○	/	/
roulettes escamotables avec déverrouillage en douceur (Ø 75 mm)	●		●		●		●		●	●	●	●
commande manuelle	/		/		/		/		●	●	●	●
commande circulaire	●	/	●	/	●	/	●	/	●	●	/	/
interrupteur de sécurité – EVV-S	○	/	○	/	○	/	○	/	○	○	○	○
batterie de sécurité – BB-S	○	/	○	/	○	/	○	/	○	○	○	○
connecteur électrique pour équilibrage de tension – PPEQ	○		○		○		○		○	○	○	○
charge maximale d'utilisation 250 kg	●		●		●		●		●	●	●	●



in f Bring treatment to a higher level!

Novak M d.o.o.

Pod smrekami 5
SI - 1218 Komenda

Email: info@novak-m.si
Tel: +386 1 5620117
Fax: +386 1 5620118

www.novak-m.com



Dermat

info@dermat.be
www.dermat.be



massages et traitements
de physiothérapie



reddot winner 2020

TABLES DE MASSAGE ET DE THÉRAPIE S

Notre priorité est que la table thérapeutique réponde aux exigences spécifiques de votre cabinet. Consultez notre **CONFIGURATEUR** en ligne et équipez la table de manière à ce qu'elle soutienne parfaitement vos tâches quotidiennes et qu'elle offre à vos patients une sécurité et un confort maximum.



CONFIGURER



Appui-tête

- cavité faciale avec mousse à mémoire de forme et bouchon assorti
- coutures soudées et scellées autour de la cavité faciale empêchant la pénétration d'huiles et de lotions de massage
- accès sans entrave du praticien sous appui-tête en trois parties
- une poussée vers le bas ou vers le haut d'une seule main ajuste les deux accoudoirs à la fois

Rembourrage

- durable sans couture
- rembourrage en mousse souple ou ferme de 8 cm d'épaisseur
- surface de couchage plus large grâce au rembourrage fini à angle droit

Commande manuelle comprend un bouton CPR pour une position entièrement allongée, un bouton SOS pour une position Trendelenburg et une **fonction de mémoire** pour enregistrer une position au choix du praticien.



Unité de commande plus solide

- un nouveau logiciel permet des mouvements synchrones de deux sections de table
- plus facile à remplacer

Base de la table

- la couverture en plastique ABS est sans vis pour un nettoyage plus facile
- charge maximale d'utilisation standard de 250 kg

Système rétractable souple

- comprenant un amortisseur pour adoucir l'activation des roulettes

Commande circulaire

- opération simple de haut en bas de tous les côtés de la table

Ainsi le nettoyage devient plus facile

Pour garantir un **nettoyage simple** et des **normes d'hygiène élevées**, le **REMBOURRAGE** est **SANS COUTURE** et réalisé en cuir synthétique **BIOCOMPATIBLE** de haute qualité. La **COUTURE** de la cavité faciale est **SOUDÉE** et **SCELLÉE** pour **empêcher la pénétration** des **liquides**, des **lotions** de massage et des **huiles** en particulier. La **COUVERTURE en plastique ABS** qui protège la base de la table est **sans vis** et donc **complètement lisse**. Les **LEVIERS DE RÉGLAGE** de l'appui-tête et du repose-jambes avec un **mécanisme intégré** dans le cadre sont **plus faciles à actionner** et **à nettoyer**.

Pour maximiser le confort et faciliter l'utilisation

Pour maximiser le confort du patient, **LE REMBOURRAGE de 8 cm d'épaisseur** est constitué de **deux couches de mousse**. Il est **durable et confortable** le long de la **surface de couchage entière**, maintenant encore plus large grâce au **rembourrage fini à angle droit**. Pour soutenir pleinement les traitements, vous pouvez choisir entre un rembourrage en mousse **souple** ou **ferme**, disponible dans plus de 30 couleurs. La **CAVITÉ FACIALE** avec **mousse à mémoire** sur les bords assure un confort parfait en position couchée. Un **BOUCHON correspondant** est également proposé en standard. En option, la table peut être équipée d'une **SECTION D'APPUI-TÊTE EN TROIS PARTIES** qui permet aux **praticiens** un **accès sans entrave** lorsqu'ils traitent des patients assis à la section de tête. Avec le **NOUVEAU MÉCANISME** de réglage des accoudoirs, une **pression d'une seule main** suffit pour abaisser ou relever les deux accoudoirs à la fois. Vous pouvez choisir entre des tables d'examen à réglage **ÉLECTRIQUE** ou **HYDRAULIQUE**. Le réglage simple de la hauteur permet un **accès facile** pour les patients ainsi qu'une **hauteur de travail confortable** pour le praticien. En poussant la **COMMANDE CIRCULAIRE** vers le haut ou vers le bas, vous pouvez **abaisser** ou **lever** les tables électriques sans aucun effort, des **quatre côtés** de la table. La hauteur des tables hydrauliques peut être réglée en appuyant sur la **PÉDALE** située sur **deux côtés** de la table. La **COMMANDE MANUELLE** comprend deux boutons pour les **positions préenregistrées à plat** et **Trendelenburg** et une **fonction de mémoire** pour enregistrer une position au choix du praticien. La **CHARGE MAXIMALE D'UTILISATION** a été portée à **250 kg**, ce qui contribue à une **parfaite stabilité**, même en appliquant une forte pression pendant le traitement. Grâce au nouveau logiciel qui permet le **MOUVEMENT SYNCHRONE** des deux sections couchées du milieu, peuvent **positionner** leurs **patients plus facilement** et **plus rapidement**. La table repose fermement sur ses quatre **PIEDS EN CAOUTCHOUC**. Pour déplacer la table à travers la pièce, elle est équipée de **ROULETTES ESCAMOTABLES**. Grâce à un **amortisseur**, l'activation des roulettes sont plus douces.

Pour divers traitements, massages et thérapies

La **CAVITÉ FACIALE AVEC UN BOUCHON ASSORTI** et **RÉGLAGE ÉLECTRIQUE** de la hauteur constituent désormais l'**équipement standard** des tables de massage et de thérapie de la ligne S renouvelée. Deux modèles de table de massage offrent une **surface de couchage large et confortable** pour effectuer des massages et des soins. Si les traitements exigent des positions avec inclinaison négative pour permettre la **position Jackknife** ou **Trendelenburg**, des tables de thérapie sont disponibles en 3, 4 et 8 sections. La Table de thérapie S8 **entièrement équipée** comprend en standard une section de tête en **trois parties** et des **ailes latérales pliables** plus **robustes** intégrées dans la section dorsal. La table Bobath offre une **SURFACE** extra **LARGE** pour les traitements de rééducation. Les modèles à une et deux sections comprennent dorénavant un **INTERRUPTEUR à MAIN** pour régler la hauteur et, avec un Bobath à deux sections, la section de tête également.